

NÄSTA GENERATIONS DESINFEKTIONSMEDEL

Incidin® OxyFoam S och OxyWipe S


Bruksfärdigt rengörings-/desinfektionsmedel med Snabbverkande H_2O_2 ™

Incidin OxyFoam S och Incidin OxyWipe S har en innovativ sammansättning med en patenterad väteperoxidlösning som verkar över ett brett spektrum.

Produkterna är effektiva mot ett brett spektrum av bakterier och virus samt avdunstar snabbt utan att lämna aktiva rester.

Incidin OxyFoam S och OxyWipe S:

- ▲ är de första sporicida och virucida desinfektionsmedlen för alla ytor
- ▲ innehåller Snabbverkande H_2O_2 ™
- ▲ uppfyller EN 16615
- ▲ har ingen faromärkning (enl. CLP) och kräver därför inte personlig skyddsutrustning¹
- ▲ har utmärkt materialkompatibilitet

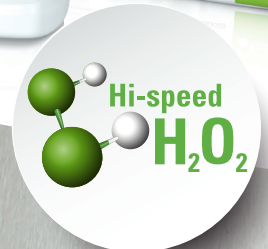

Incidin® OxyFoam S och OxyWipe S

Bruksfärdigt rengörings-/desinfektionsmedel med
Snabbverkande H₂O₂TM

3 MIN²

Sporicida mot
C.difficile (SUSPENSIONS TEST)

2 MIN²

Virucida
(UNDER RENA FÖRHÅLLANDEN)

1 MIN²

Baktericida
(EN 13727 / 16615)

HUVUDEGENSKAPER	FÖRDELAR
EFFEKTIVA	Effektiva mot ett brett spektrum av bakterier och virus. Korta kontakttider
SÄKRA	Ingen faromärkning (enl. CLP); kräver ingen personlig skyddsutrustning
ENKLA ATT ANVÄNDA	Rengör och desinficerar i ett enda steg. Har utmärkt materialkompatibilitet

MIKROBIOLOGISKA OCH VIROLOGISKA TESTRESULTAT

VERKNINGSGRAD I OUTSPÄDD FORM	OxyFoam S KONTAKTTID	OxyWipe S KONTAKTTID
Testad enl. RKI-rekommendation 01/2004* (under smutsiga förhållanden)		
Effektiv mot höjeförsedda virus enl. RKI-rekommendation 01/2004*	15 sek	30 sek
Polyoma SV40*	30 sek	30 sek
Europeiska normer (under rena och smutsiga förhållanden)		
EN 13727 baktericid	1 min	2 min
EN 13624 jästicid	1 min	15 min
EN 13624 fungicid	5 min	30 min
EN 14348 tuberkulocid, mykobaktericid	5 min	30 min
EN 14476 virucid	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sek	30 sek
EN 14476 Noro	1 min (rena förhållanden) 15 min (smutsiga förhållanden)	15 min
EN 13704 sporicid**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
Europeiska normer (under smutsiga förhållanden) – fyrfältstest		
EN 16615 baktericid	1 min	2 min
EN 16615 jästicid	1 min	1 min
EN 16615 fungicid	5 min	5 min
EN 16615 tuberkulocid, mykobaktericid	5 min	5 min
Sporicid (metod EN 16615)**	15 min	30 min
C. difficile (metod EN 16615)**	5 min	5 min

* DVV 2008

** Under rena förhållanden

INCIDIN OXYFOAM S BRUKSANVISNINGAR



- 1 Spreja ytan från ca 30 cm håll
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka



- 1 Applicera på en ren torkduk
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka

ECOLAB AB

Box 164 125 24 Älvsjö
Armborstvägen 1
125 44 Älvsjö
Tel: +46 8 60 32 200
Fax: +46 8 60 32 238
www.se.ecolab.eu



TILLVERKARE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0



EFFECTIVE.
SAFE.
CONVENIENT.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Incidin OxyFoam S:
Rengörande och
desinficerande skumsprej för
medicinska ytor (inkl. t.ex.
sonder) och inventarier.



Incidin OxyWipe S:
Rengörande och
desinficerande våtservetter
för medicinska ytor (inkl.
t.ex. sonder) och inventarier.



BRUKSANVISNINGAR

Incidin OxyFoam S: Spreja ytan från ca 30 cm håll och stryk ut med en ren torkduk. Produkten kan också användas i outspädd form på en ren torkduk. Stryk ut över ytan och låt torka.

Incidin OxyWipe S: Ta en våtservett och torka av ytan noggrant. Se till att hela ytan blir ordentligt blöt. Låt torka. Skölj inte av. Se till att hela ytan täcks. Stäng locket efter användning.

Ska ej användas för slutdesinfektion av invasiv medicinsk utrustning. Använd inte på ytor som är känsliga för oxiderande ämnen, t.ex. marmor, koppar och mässing.

INNEHÅLL

Innehåll per 100 g: Incidin OxyFoam S: 1,5 g väteperoxid. Incidin OxyWipe S: 1,5 g väteperoxid | pH-värde ~ 2,0-2,1

FÖRPACKNINGS- OCH BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

PRODUKT	LEV-FÖRP	ART. NR
Incidin OxyFoam S	6 x 750ml	3082910
Incidin OxyFoam S	2 x 5L	3087450
Tappkran OxyFoam S 5L	10st	10033882
Incidin OxyWipe S	6 x 100st	3083020
Väggställare OxyWipe S	1st	10033877

FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt (ej över 25 °C). Förvaras i originalförpackningen och skyddas från direkt solljus. Hållbarhet efter öppning:

Incidin OxyFoam S: t.o.m. sista förbrukningsdag

Incidin OxyWipe S: 3 månader

Referenser

1. Det finns inget behov av personlig skyddsutrustning vid användning av Incidin OxyFoam S eller OxyWipe S. Normal skyddsutrustning bör dock användas där så krävs.
2. Incidin OxyFoam S

ANVÄND BIOCIDER PÅ ETT SÄKERT
SÄTT. LÄS ALLTID ETIKETT OCH
PRODUKTINFORMATION INNAN
ANVÄNDNING. ENDAST FÖR
PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

