

KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE BETTPFANNEN WASCHMASCHINEN

Anios LB 20

SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE WASCHBECKEN.

- Saurer Klarspüler
- Hohe Löslichkeit von Kalziumsalzen
- Speziell für die Anwendung in thermischen Bettpfannen Waschmaschinen entwickelt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
- pH-Wert des Konzentrats* bei +20°C: ca. 1,5
- pH-Wert verdünnt bei 0,05%*: 3,6
- pH-Wert verdünnt bei 0,3%*: 2,9
- Dichte (Konzentrat) bei +20°C: 1,054 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,5%: 107,6 - 474 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 20 Kanister	4 x 5 L	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSGEBIET

Saurer Klarspüler für thermische Waschbecken.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung für den professionellen Einsatz. Verdünnung gemäß dem Bettpfannen Waschprogramm (0,5 bis 5ml / Liter).

INHALTSSTOFFE

Basierend auf Zitronensäure und Milchsäure.

LAGERUNG


Gefahr - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.

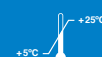

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH.

ECOLAB®

www.ecolab.at