
Aniosyme Synergy 5

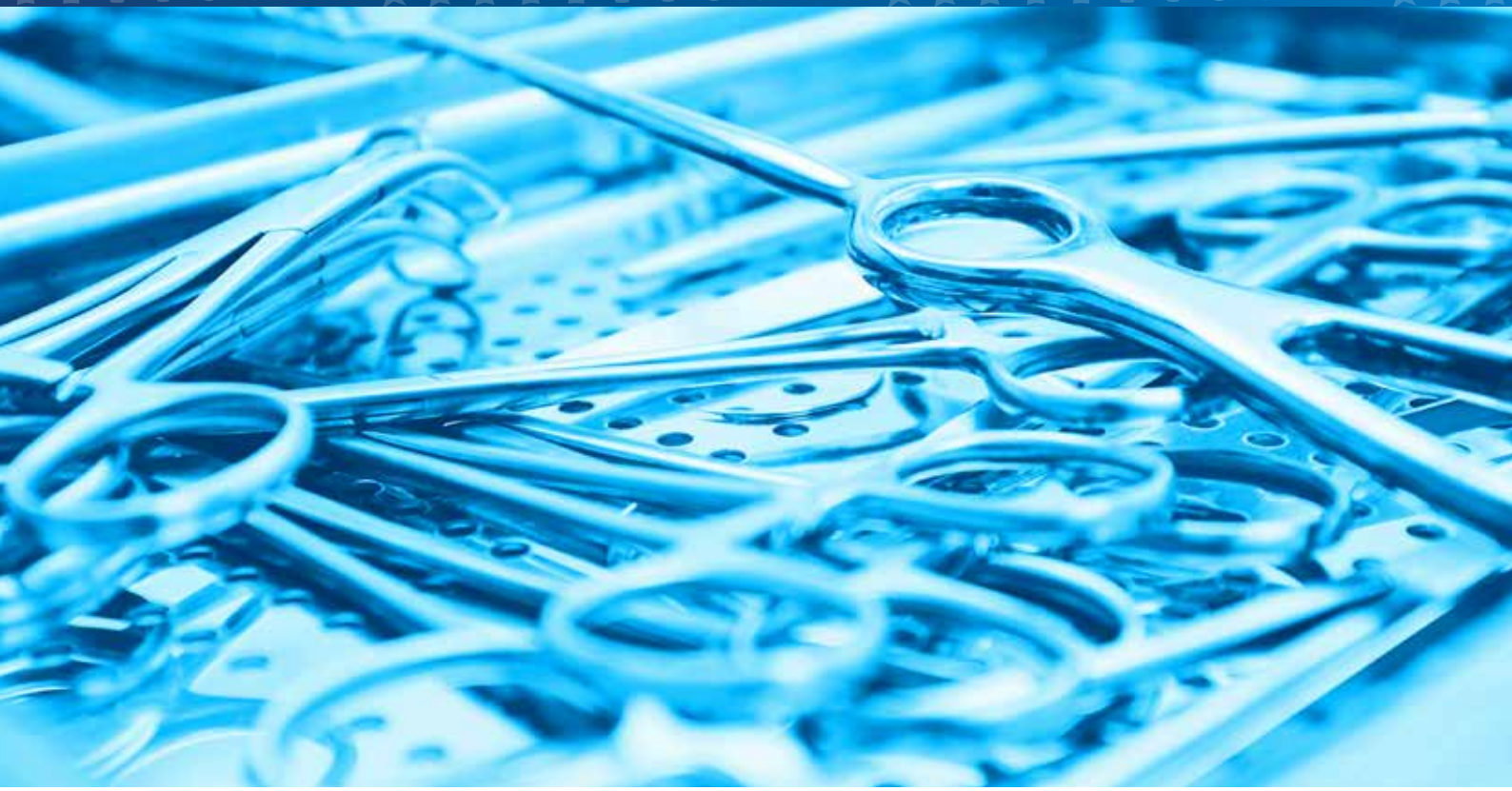

5 Enzyme in einem einzigen Produkt

Instrumentenreiniger mit 5 Enzymen

Aniosyme Synergy 5 ist der erste Reiniger mit 5 Enzymen für mehrere Anwendungen. Aniosyme Synergy 5 bietet hervorragende Reinigungsergebnisse für die manuelle und maschinelle Aufbereitung und ermöglicht einen Ein-Produkt-Ansatz in der Zentralsterilisation:

Aniosyme Synergy 5:

- **EINZIGARTIG** - 5-Enzym-Reiniger mit breitem Leistungsspektrum
- **EFFEKTIV** - Wirksam ab 5 Minuten im Reinigungs- und Desinfektionsgerät und für alle Wasserqualitäten geeignet
- **SYNERGETISCH** - Unser Produkt für die manuelle und automatisierte Aufbereitung in der ZSVA



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Aniosyme Synergy 5

Instrumentenreiniger mit 5 Enzymen



Aniosyme Synergy 5
5 L Kanister



Aniosyme Synergy 5
5 L Kanister



Aniosyme Synergy 5
1 L Flasche

Stark

Nachgewiesene Wirksamkeit ab 5 Minuten kombiniert mit exzellenter Materialverträglichkeit.

Enzymatisch

Entfernung aller Arten von Verschmutzungen durch flexible Dosierung aufgrund der speziell entwickelten Formulierung mit 5 Enzymen.

Effektiv

Nachgewiesene Wirksamkeit bei der niedrigsten Konzentration von 0,1 % bis 0,5 % für ausgezeichnete Reinigungsleistung.

Produkteigenschaften

• Dichte	20°C	1.10 g/mL
• pH-Wert* (Konzentrat)	20°C	7.89
• pH-Wert* (Verdünnung von 1 – 5 mL/L)	20°C	6.89 - 7.29
• Leitfähigkeit (Verdünnung von 1 - 5 mL/L in VE Wasser)	20°C	0.08 - 0.33 mS/cm

* pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

Verpackungs- und bestellinformationen

Anwendung im tauch- oder ultraschallbad	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 L Flasche	3102850
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 L Kanister + 25 mL Pumpe	3102870

Maschinelle anwendung	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 L Kanister	3102890
Aniosyme Synergy 5	1 x 200 L Fass	3105790

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB GmbH
(REG. HOLDER FOR: A, BG, CZ, HR, HU, RO, SK, SLO NOSITELJ ODOBRENJA ZA HR)
Rivergate
Handelskai 92
1200 Wien, Österreich

Anwendungsbereich

Reinigung von medizinischen Produkten und Endoskopieinstrumenten im Tauchbad, im Ultraschallbad, in automatischen Reinigungsgeräten und in Taktbandanlagen.

Gebrauchsanweisung

Manuelle Behandlung
Entlüften Sie die zugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch

- Konzentrierte Lösung
- Vor der Anwendung auf 0.5 % bis 2 % verdünnen
- Wirksam ab 5 Minuten
- Passen Sie die Konzentration und die Kontaktzeit der verdünnten Lösung an den Verschmutzungsgrad an. Bei Bedarf bürsten
- Sorgfältig abspülen
- Höchsttemperatur: 35 °C

Automatische Behandlung

- Konzentrierte Lösung
- Bei einer Verdünnung von 0.1 % bis 0.5 % verwenden
- Wirksam ab 5 Minuten
- Passen Sie die Konzentration, Kontaktzeit und Temperatur der verdünnten Lösung an den Verschmutzungsgrad an. Sorgfältig abspülen.
- Maximale Temperatur: 60 °C

Zusammensetzung

Nichtionische und kationische Tenside, Komplexbildner, Stabilisierungsmittel, enzymatischer Komplex, Hilfsstoffe.

Lagerung

Gefährlich - Vorsichtsmaßnahmen für die Gebrauch beachten (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5 °C und +25 °C.

Zertifikate

Wissenschaftliche Zertifikate (Wirksamkeit, Kompatibilität usw.) auf Anfrage erhältlich.

Medizinprodukte immer unter sicheren Bedingungen verwende

Vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2026 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-A.SYG5-5006-2-AT-0326 2235EXA16